

L'art de voir ce que les autres ne voient pas.



Loupes, éclairages et caméras sur mesure, fabriqués à la main

admetec
We've got your back



We've got your back.

Loupes Admetec, éclairages et caméras fabriqués à la main et conçus sur mesure

Admetec est spécialisé dans la création d'équipements exceptionnellement légers, pratiques à utiliser et ergonomiques – ce qui vous permet de vous concentrer sur votre performance tandis que nous nous concentrons sur votre confort.

Nos loupes, éclairages et caméras fabriqués à la main sont conçus sur mesure pour VOUS, en tenant compte de la structure unique de votre visage, de votre distance de travail, de votre style et de vos préférences personnelles.

L'excellence d'Admetec repose sur une combinaison simple : l'utilisation de matériaux et composants de haute qualité et une conception centrée sur l'utilisateur.

Loupes Galiléennes

Les loupes Galiléennes sont extrêmement compactes et légères tout en assurant un large champ de vision et une excellente profondeur de champ. Elles sont parfaites pour les praticiens souhaitant bénéficier d'une vue d'ensemble et qui n'ont pas nécessairement besoin d'un fort grossissement. Nos loupes galiléennes sont disponibles en 3 niveaux de grossissements.

Conçues pour votre distance de travail spécifique, au centimètre près.



2.5x

Distance de travail
30-60 cm

Poids
45 g



2.7x

Distance de travail
30-60 cm

Poids
37 g



3.2x

Distance de travail
30-60 cm

Poids
37 g

Loupes Prismatiques

Les loupes Prismatiques offrent un grossissement plus important sans réduction du champ de vision, ainsi qu'une image précise, à la clarté cristalline, d'un bord à l'autre et aux couleurs fidèles. Nos loupes prismatiques sont disponibles en 3 niveaux de grossissements.

Conçues pour votre distance de travail spécifique, au centimètre près.



4.0x

Distance de travail
35-55 cm

Poids
52 g



4.8x

Distance de travail
35-55 cm

Poids
53 g



5.5x

Distance de travail
35-55 cm

Poids
54 g

Loupes ergonomiques

Les loupes Ergo d'Admetec sont disponibles en 6 grossissements.

Conçues pour votre distance de travail spécifique, au centimètre près.



3.0x

Distance de travail
35-70 cm

Poids
46 g



4.0x

Distance de travail
35-70 cm

Poids
46 g



5.0x

Distance de travail
35-70 cm

Poids
48 g



6.0x

Distance de travail
35-70 cm

Poids
48 g



7.5x

Distance de travail
40-70 cm

Poids
49 g

Le plus grand grossissement ergonomique disponible pour la précision dont vous avez besoin.

La puissance du 10x

Distance de travail
40-70 cm

Poids
52 g

Technologie Ergo Prism
développée par Admetec

Lentilles légères en polycarbonate
pour la durabilité et une qualité
d'image premium



Lentilles oculaires du leader
mondial japonais de la fabrication
de lentilles en verre, FUJITOK®


Le problème

La position statique, souvent contorsionnée, provoque des microtraumatismes aux muscles, aux articulations et aux ligaments – des dommages quotidiens qui augmentent plus vite que la capacité du corps à guérir.

Avec le temps, ces blessures progressent lentement vers des troubles permanents liés à ces traumatismes répétés. Cela entraîne des douleurs chroniques au dos et au cou qui affectent, voire interrompent, la carrière d'un trop grand nombre de praticiens talentueux. .

Notre solution

Les loupes Ergo sont les premières loupes véritablement ergonomiques, conçues sur mesure, qui fonctionnent avec la conception biomécanique du corps plutôt que contre elle.

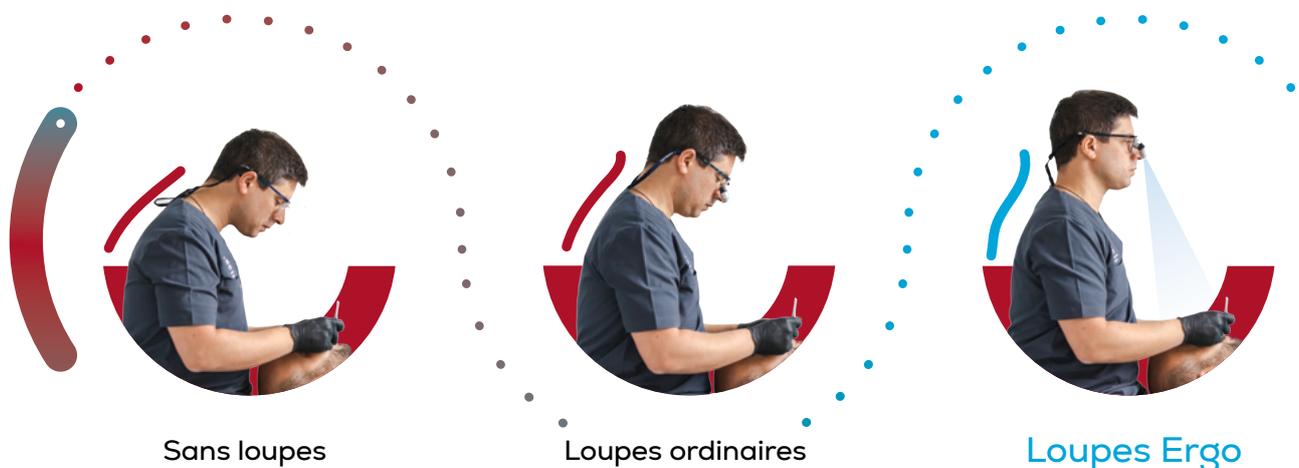



ergo v™

L'alliance parfaite de
l'ergonomie et de la polyvalence



Principaux avantages

3 grossissements, 1 appareil, la même posture.

Découvrez une précision inédite grâce à des loupes réglables offrant trois grossissements dans un seul appareil.

Ergo V™



Poids
55 g

Grossissements
3.8x, 5.3x, 7.0x

Distance de travail
40-70 cm

Ergo V Pro™



Poids
60 g

Grossissements
5.6x, 7.4x, 10x

Distance de travail
40-70 cm



Design ergonomique

Posture optimale et réduction des tensions



Polyvalence incomparable

Changez de grossissement en toute simplicité



Confort maximal

Légères pour une utilisation sans fatigue

Caractéristiques



Compatible avec toutes les montures Admetec

Technologie optique Ergo signée Admetec

Alliage d'aluminium ultra-léger

Lentilles FUJITOK®, leader mondial du secteur.



Technologie de grossissement variable

Passez d'un grossissement à l'autre en toute simplicité, avec trois niveaux réunis dans un seul appareil, pour une précision, une polyvalence et un confort ergonomique incomparables.

Éclairage puissant. Ultra-léger. Sans fil.

Découvrez Butterfly EVO, la gamme d'éclairages sans fil d'Admetec, qui comprend deux modèles conçus pour une efficacité optimale.

✓ Léger

Conçu de manière ergonomique pour reposer en toute légèreté sur vos loupes

✓ Sans fil

La liberté de mouvement accroît le confort et l'efficacité

✓ Commandes conviviales

Fonctionnement simple avec des commandes par tapotement pour la fonction ON/OFF et l'intensité de la luminosité

✓ Affichage du voyant de charge

Sachez toujours où en est la charge de votre batterie



Butterfly™ EVO

Butterfly combine un éclairage efficace dans un boîtier ultra-léger, configuration sans fil facile à utiliser.

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
35k LUX	23 g	2 h	1h25
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Clip externe	3	5,750k	



Butterfly-S™ EVO

Butterfly-S fournit une intensité lumineuse plus forte pour permettre de travailler avec des grossissements plus élevés.

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
55k LUX	28 g	2 h	1h30
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Clip externe	3	5,750k	





Éclairages filaires



Orchidée™

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
80k LUX	9 g	6 h	2h30
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Filtre externe	2	5,750k	



Orchid-F™

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
80k LUX	10 g	6 h	2h30
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Intégré	2	5,750k	



Orchid-E™

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
150k LUX	12 g	6 h	2h30
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Intégré	2	5,750k	



Orchid-S™

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
220k LUX	11 g	4 h	2h30
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Filtre externe	2	5,750k	



Si vous avez besoin d'aide dans le choix de l'éclairage le mieux adapté à vos loupes, consultez notre guide en ligne.

www.admetec.com/fr/how-to-choose-headlight-for-loupes/

admetec flamingo™

Caméra sans fil Full HD et éclairage intégrés pour vos loupes.



| We've got your back.



Il est difficile de voir l'intérieur de la bouche d'un patient.
Il est encore plus difficile de partager ce que l'on voit avec
d'autres personnes.



La plupart des gens adorent documenter ce qui leur tient à coeur. Les médecins passionnés ont, eux, plusieurs raisons de vouloir enregistrer leur travail :



Documentation facile

Il simplifie la documentation en direct pendant les procédures, en garantissant un partage visuel clair et instantané.

Outil pédagogique

Outil pédagogique dynamique, il permet d'effectuer des démonstrations en temps réel à des collègues et à des étudiants, améliorant ainsi les expériences d'apprentissage.

Confiance des patients

Il renforce la confiance des patients et positionne votre cabinet comme un pilier avant-gardiste en matière de soins dentaires.

Caracéristiques de Flamingo™

☺ **Caméra et éclairage sans fil**

Grâce à l'intégration d'un éclairage puissant (60K Lux) et d'une caméra Full HD (1080p | 30fps), Flamingo se révèle hautement efficace. La conception intégrée garantit que la caméra reste alignée avec la zone illuminée, enregistrant une image correctement éclairée de haute qualité, sans les ombres susceptibles de se produire lorsque la source de lumière provient d'en haut.

☺ **Ultra-léger – seulement 19 grammes !**

En tant que fabricants de loupes, nous savons que chaque gramme compte. Nous avons conçu Flamingo pour être une extension ultra-légère et ergonomique de vos loupes.

☺ **Mise au point réglée à votre distance de travail spécifique**

L'ergonomie étant essentielle, Flamingo a été conçu avec une mise au point manuelle qui, une fois réglée à votre distance de travail spécifique, ne bouge plus. La fonctionnalité de mise au point automatique ajouterait un poids superflu et une désorientation peu agréable, qui susciteraient une tension physique et un stress. Il vous suffit donc de régler votre distance de travail, et vous voilà prêt !

☺ **Mouvement sans restriction**

La batterie PowerPack d'Admetec permet une grande liberté de mouvement grâce à l'unique câble. Flamingo est livré avec 2 batteries afin que vous puissiez en utiliser une pendant que l'autre se charge.

Autonomie de la batterie selon votre utilisation de Flamingo :

Éclairage seul ou caméra seule : 8 heures

Caméra et éclairage : 4 heures

☺ **Diffusion en temps réel via WiFi**

La transmission sans fil Flamingo projette directement sur l'ordinateur, transformant les explications de ce que vous faites en démonstrations en direct pour vos collègues et/ou étudiants.

☺ **Logiciel propriétaire Admetec**

Notre logiciel permet le montage vidéo, notamment la prise de captures d'écran de qualité et les mises à jour automatiques du logiciel.



Quel style vous fait vibrer ?

Vous êtes toujours VOUS lorsque vous êtes au travail. C'est pourquoi nous avons veillé à proposer une large variété de montures pour vous permettre d'exprimer votre personnalité singulière et de travailler dans le confort.



Blues

-  Bleu Marine
-  Bronze et bleu clair
-  Noir
-  Rose
-  Violet et gris
-  Or rose



Indie

-  Champagne
-  Orange lave
-  Bleu nuit
-  Noir
-  Turquoise
-  Vert



Soul

-  Rose
-  Marron et bleu clair
-  Bourgogne et or
-  Noir
-  Turquoise
-  Blanc neige



Jazz

-  Rouge et noir
-  Orange et noir
-  Bleu et noir
-  Vert et noir
-  Turquoise et or rose



Swing

-  Noir
-  Bleu
-  Graphite
-  Rouge
-  Or rose
-  Blanc



Progear®

-  Rouge et marron métallisé
-  Vert foncé et blanc
-  Blanc et bleu
-  Noir



Bollé®

-  Brun canon





Pratiques. Compactes. Antichoc.

Votre expérience Admetec se poursuit au-delà des heures de travail. Que se passe-t-il lorsque vous n'êtes pas en train de travailler avec vos loupes et votre éclairage ? Où les rangez-vous ? Comment les protéger et les maintenir en bon état au fil du temps ? Si vous travaillez dans plusieurs cabinets, comment transportez-vous vos loupes et votre éclairage ? Pour vous faciliter la tâche et protéger au mieux votre équipement, nous avons conçu des mallettes pratiques, compactes et antichocs pour chaque set de produits Admetec.

Butterfly (tous les modèles)

3 Batteries | Socle de charge et câble | Loupes | Mode d'emploi



Orchid (tous les modèles)

2 PowerPacks | Chargeur | Loupes | Mode d'emploi

Loupes

Cordon | Lingette microfibre | Mode d'emploi



Partout dans le monde,
nous prenons soin de vous



**PLUS DE 50
DISTRIBUTEURS
À L'INTERNATIONAL**



Trouvez votre distributeur Admetec sur
admetec.com/fr/distributors

**Voir la passion
dans les détails**





We've got **your back.**

Admetec conçoit, développe, fabrique et distribue des loupes grossissantes sur-mesure, fabriquées à la main, des éclairages LED, ainsi qu'un dispositif caméra-LED intégrés. Nous sommes spécialisés dans la création de produits exceptionnellement légers, pratiques à utiliser et ergonomiques, qui vous permettent de rester concentré sur votre efficacité tandis que nous nous concentrons sur votre confort.



admetec
We've got your back

+972-4-989-0747 info@admetec.com admetec.com